











Fitrus Band

Schnellstarthandbuch

- | | | |
|---|--|---|
|  Run-modus |  Schrittzähler |  Schlafüberwachung |
|  Blutdruck |  Herzfrequenz |  Temperatur |
|  Benachrichtigungen |  Aktivitätsbenachrichtigungen | |

1 Inbetriebnahme

1.1 Aufladen

Nachdem Sie die Armbänder an beiden Seiten abgezogen haben, schließen Sie den blauen Endstecker zum Aufladen an den Computer oder das USB Ladegerät.

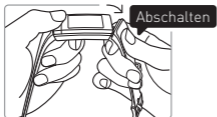


Abbildung für das Entfernen des Fitrus Band

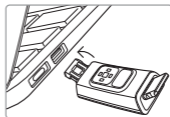


Abbildung des

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte verwenden Sie zum Laden die blaue Schnittstelle. Bitte beachten Sie die Richtung des USB-Blechs. Nach dem Einstecken erscheint eine Ladeaufforderung auf dem Bildschirm.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Kontakt gut ist. Wenn keine Ladeaufforderung auf dem Bildschirm erscheint, können Sie eine weitere Ladung durchführen und beobachten.

1.2 Einschalten

Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um es einzuschalten

Ausschalten

Gehen Sie zur Shutdown-Schnittstelle und halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um es auszuschalten.

1.3 App-Installation und -Herunterladen

Scannen Sie den QR-Code zum direkten Herunterladen oder suchen Sie im App Store und Google Play nach Fitrus, um die App herunterzuladen und zu installieren.



1.4 Verbinden des Geräts mit dem Smartphone

Öffnen Sie die Fitrus App (nachfolgend APP genannt), geben Sie die Kontonummer, die personenbezogenen Informationen usw. ein, und folgen Sie einfach den Anweisungen auf der App-Anleitungseite, um die relevanten Schritte abzuschließen.

1.5 Grundbedienung

Die Touch-Taste außerhalb des Displays ist bequem zu bedienen. Wechseln Sie zum letzten / nächsten, indem Sie nach links / rechts gleiten. Keine Barriere auf dem Display. Vermeiden Sie den Loop-Betrieb durch einmaliges Berühren.

2 Grundfunktion

- 2.1 Das Gerät kann die Sportdaten (Schrittzahl, Kilometerstand, Kalorien usw.) während der täglichen Tragezeit automatisch überwachen. Sie können durch Drücken zur Sport-Schnittstelle die zugehörigen Daten anzuzeigen.
- 2.2 Das Gerät überwacht nachts automatisch die Schlafdaten. Sie können durch Drücken zur Schlaf-Schnittstelle die Schlafqualität anzuzeigen. Nach dem manuellen Einschalten des wissenschaftlichen Schlafschalters können Sie Mittagsschlaf, unkonventionelle Routinen (z.B. Nacharbeit, Tagesruhe) und detailliertere Nachtschlafdaten überwachen.


- 2.3 Das Gerät unterstützt die Überwachung der Herzfrequenz und des Blutdrucks. Tippen Sie auf die Taste, um die Herzfrequenz- und Blutdruckoberfläche aufzurufen und den Test direkt zu starten.
- 2.4 Das Gerät unterstützt den Laufmodus. Tippen Sie auf die Taste, um die Laufen-Oberfläche aufzurufen und die Übung zu starten.
- 2.5 Auf dem Bildschirm können Sie die grundlegenden Daten jeder Funktions- schnittstelle anzeigen und mit der APP synchronisieren, um die Details anzuzeigen.
Das Gerät verfügt über einen begrenzten Speicherplatz und die Daten werden für 3 bis 5 Tage gespeichert.
Um Datenverlust zu vermeiden, verbinden Sie bitte das Gerät mit der App täglich, um zu synchronisieren.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn die Haut des Benutzers zu trocken ist, wird empfohlen, ein Gel, eine Lotion aufzutragen oder ein heißes Handtuch für eine Weile auf Ihr Handgelenk zu legen, um die richtige Messung vorzunehmen.
- Die Messung ist möglicherweise ungenau, wenn Sie während der Messung sprechen.
- Wenn der wissenschaftliche Schlafmodus eingeschaltet ist, sind genauere Messungen erforderlich, um PPG-Signale zu erfassen. Tragen Sie das **Fitrus Band** daher eng genug, sodass nur ein Finger in das Band passt, damit der hintere Sensor des **Fitrus Band** Ihr Handgelenk vollständig berühren kann.



Berühren Sie vollständig zwischen **Fitrus Band** und Haut

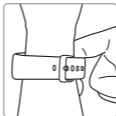

Ermöglicht es nur, einen Finger fest einzustecken



Berühren Sie den Sensor auf der Unterseite mit der Pulpa fest, um den Test durchzuführen

- Herzfrequenz, Blutdruck, Sie müssen die Lichtschranke an der Rückseite des Geräts am Handgelenk befestigen, um einen bequemen, passgenauen Tragezustand zu gewährleisten.
Das Tragen von zu losem oder zu festem Tragen wirkt sich auf die Testdaten aus.
- Bei der Überwachung der Herzfrequenz und des Blutdrucks sollten Sie sich entspannt bleiben und den Körper unbewegt halten.
Sie können die automatische Überwachung im Einstellungsmenü der App einoder ausschalten.
- Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät und die gesammelten Daten und Informationen dienen nur als Referenz.
- Die normale Schlafüberwachungstechnologie, die bei diesem Gerät angewandt wird, basiert auf den Beschleunigungsdaten und nicht auf den menschlichen physiologischen Eigenschaften.
Die Daten werden nur dazu verwendet, um den allgemeinen Schlafzustand zu kennen.
Die Erkennung von Einschlafen und Aufwachen erfordert bestimmte Zeit und Daten.
Stilles Liegen, das wie das Schlafen wirkt, wird auch als Schlafzustand erkannt.
- Das Gerät besteht aus professionellen und ungiftigen Materialien.
Bitte tragen Sie es sorglos.
Wenn Sie beim Tragen auf der Haut unwohl fühlen, nehmen Sie das Gerät ab und fragen Sie den Arzt um Rat.

3 Erinnerungsfunktion

3.1 Anruferinnerung

Wenn ein Anruf eingeht, wird das Gerät vibrieren.
Sie können das Gerät stumm halten oder den Anruf ablehnen.

3.2 Nachrichtenerinnerung

Wenn eine neue Nachricht auf der Statusleiste des Handys erscheint, wird das Gerät vibrieren und Sie können die Nachricht auf dem Gerät anzeigen.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen

- Für die Anruf- und Nachrichtenerinnerung muss eine gültige Verbindung zwischen dem Handy und Gerät aufrechterhalten werden.
- Sie müssen die Benachrichtigungsfunktion der Statusleiste des Handys aktivieren und die Erinnerungsfunktion im Einstellungsmenü der App einschalten.

4 Wasserdichtigkeit

- 4.1 Dieses Gerät ist nach der Schutzklasse IP68 wasserdicht.
Vor der Lieferung wird das Gerät überprüft und es weist in bestimmten Umgebungen wasserdichte Eigenschaften auf.
- 4.2 Die wasserdichte Eigenschaft dieses Geräts ist nicht dauerhaft versichert und kann mit der Zeit nachlassen.
- 4.3 Könnte es zum Schwimmen, Surfen, Händewaschen, kalten Duschen, regnerischen Tag und andere normale Anlässe verwenden.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen:


In den folgenden Bedingungen kann die Wasserdichtigkeit des Geräts beeinträchtigt werden und Sie sollten beachten


- Fall, Stöße oder andere Aufpralle
 - Kontakt mit Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmitteln, Parfüm, Lotion, Öl usw.
 - Heißes Baden und Saunen oder andere Szenarien mit hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- 4.4 Schäden, die auf das Eindringen der Flüssigkeiten zurückzuführen sind, fallen nicht unter die kostenlose Garantie.


The logo features the letters 'OSD' in a large, bold, sans-serif font. Below it, the words 'ONE SOFT DIGM' are written in a smaller, spaced-out, all-caps sans-serif font. The background consists of several overlapping, white-outlined triangles of varying sizes and orientations, creating a dynamic, geometric pattern.


OSD

ONE SOFT DIGM

 +82-54-282-4467

 +82-50-4047-8250

 osd.sale@onesoftdigm.com

 CHANGEUP GROUND #401 #402, 87 Cheongam-ro,
Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37673,
Republic of Korea